

IZTURĪGĀS MANŠETES LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Šī lietošanas instrukcija (LI) ir neatņemama izstrādājuma daļa, un tajā ir aprakstīts, kā izstrādājumu droši lietot atbilstoši tam paredzētajam nolūkam. Pirms šī izstrādājuma lietošanas izlasiet šo LI un glabājiet LI kopā ar izstrādājumu, lai tā būtu pieejama jebkurā laikā.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Therm-X AT ir paredzēts aukstuma, siltuma, kontrasta un kompresijas terapijas nodrošināšanai pacientiem, kuriem šīs terapijas ir indicētas.

LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

Izturīgās manšetes (muguras, gūžas, ceļgala, potītes, apakšstilba, pleca, XL pleca, elkoņa un plaukstu) ir Therm-X sistēmas komponenti. Therm-X AT apvieno aukstuma, siltuma, kontrasta un kompresijas terapiju. Therm-X ir paredzēts pēcoperācijas un akūtu traumu ārstēšanai, lai mazinātu tūsku, pietūkumu un sāpes, kuru gadījumā ir indicēts aukstums un kompresija. Tas ir paredzēts pēctraumatisku un pēcoperācijas medicīnisku un/vai ķirurģisku stāvokļu ārstēšanai, kuriem ir indicēta lokalizēta termoterapija (karstuma vai aukstuma).

Therm-X AT ir paredzēts lietošanai licencētiem veselības aprūpes speciālistiem vai pēc viņu norādījuma rehabilitācijas iestādēs, ambulatorajās klīnikās un sporta treniņu vietās.

PAREDZĒTĀ POPULĀCIJA

Therm-X AT ir indicēts pacientiem no 12 gadu vecuma.

PAREDZĒTIE LIETOTĀJI

Therm-X AT ir paredzēts lietošanai licencētiem veselības aprūpes speciālistiem vai pēc viņu norādījuma rehabilitācijas iestādēs, ambulatorajās klīnikās un sporta treniņu vietās.

KLĪNISKIE IEGUVUMI

Therm-X AT mazina tūsku, pietūkumu un sāpes, nodrošinot siltuma, aukstuma, kontrasta un/vai kompresijas terapiju pacientiem ar akūtām muskuļu un skeleta traumām, pēctraumatiskiem traucējumiem vai medicīniskas atveseļošanās laikā (pēcoperācijas periodā). Nepieciešamības gadījumā Therm-X AT ierīci var izmantot ledus, sildīšanas spilventiņu, kompresijas zeķu vai līdzīgu procedūru vietā, lai nodrošinātu konsekventāku un nepārtrauktāku termisko un kompresijas kontroli.














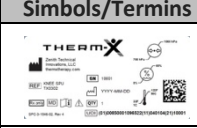

APRAKSTS

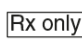Izturīgā manšete ir piepūšama, vairākiem pacientiem paredzēta ierīce, kas paredzēta ķermeņa termiskai terapijai. Izturīgā termiskā manšete ir elastīga manšete ar dzesēšanas šķidrums cirkulāciju, ko uzliek uz ķermeņa, lai nodrošinātu aukstuma, siltuma vai kontrasta terapiju kombinācijā ar pneimatisko kompresiju.

MODEĻU NUMURI

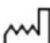Muguras manšete	TX0105	Potītes manšete	TX0104	XL pleca manšete	TX0110
Gurna manšete	TX0108	Apakšstilba manšete	TX0111	Elkoņa manšete	TX0103
Ceļa manšete	TX0102	Pleca manšete	TX0101	Rokas manšete	TX0112

SIMBOLI UN SAĪSINĀJUMI UZ PRODUKTA UN IEPAKOJUMA

Simbols/Termins	Nozīme	Simbols/Termins	Nozīme	Simbols/Termins	Nozīme
	Identifikācijas etiķete		Uzmanību! Svarīgu brīdinājuma informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.		ES pārstāvis (pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā)
	CE marķējums – atbilstība Eiropas standartiem		Ievērojiet lietošanas norādījumus		Uzmanību: saskaņā ar federālajiem tiesību aktiem šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstiem vai pēc ārsta norādījuma
	Produkta numurs		Ražotājs		Partijas numurs
	Sērijas numurs		Ražošanas datums		Medicīnas ierīce
	Skatiet lietošanas norādījumus		BF tipa lietojamā daļa		Ierīces unikālais identifikators

KONTRINDIKĀCIJAS

Therm-X kompresijas terapiju nedrīkst lietot pacienti, kuriem ir kāds no tālāk norādītajiem iepriekš pastāvošajiem veselības stāvokļiem:

- aizdomas par sastrēguma sirds mazspēju;
- iepriekš diagnosticēta dziļo vēnu tromboze (DVT);
- dziļa akūta venoza tromboze (flebotromboze);
- iekaisīgs flebīta process;
- plaušu embolijas epizodes vai citas embolijas pazīmes;
- plaušu tūska;
- akūts vēnu iekaisums (tromboflebīts);
- dekompensēta sirds mazspēja;
- arteriālā disregulācija;
- roze;
- karcinoma un karcinomas metastāzes skartajā ekstremitātē;
- dekompensēta hipertoniya;
- akūtas iekaisīgas ādas slimības vai infekcija;
- venoza vai arteriāla oklūzijas slimība;
- venozā vai limfātiskā atgriešanās nav vēlama;
- slikta perifērā cirkulācija;
- smaga arterioskleroze vai aktīva infekcija;
- dekompensēta hipertoniya skartajā zonā;
- ievērojami asinsvadu darbības traucējumi skartajā zonā;
- hematoloģiskas diskurāzijas, kas ietekmē trombozi.

Therm-X termoterapiju nedrīkst lietot pacienti, kuriem ir kāds no tālāk norādītajiem iepriekš pastāvošajiem veselības stāvokļiem:

- Reino sindroms vai citi vazospastiski stāvokļi;
- aukstuma alerģija;
- aukstuma aglutinīnu izraisīti traucējumi;
- paaugstināta jutība pret aukstumu vai karstumu;
- aukstuma radīta trauma anamnēzē;
- smaga sirds un asinsvadu slimība;
- ādas anestēzija, hiperkoagulācijas traucējumi;
- slikta cirkulācija;
- sāpju jutīgas ekstremitātes;
- ļoti zems asinsspiediens, kas izraisa darbnespēju;
- samazināta ādas jutība;
- vēnu nosiešana vai nesen veiktas ādas transplantācijas.
- feohromocitoma.

BRĪDINĀJUMI/PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- ⚠ Nelietojiet ierīci bez ārsta nozīmējuma.
- ⚠ Ievērojiet speciālista sniegtos norādījumus par ārstēšanas režīmu(-iem), zonu, biežumu un ilgumu.
- ⚠ Licencētam veselības aprūpes speciālistam ir jāizvēlas pareizais lietošanas režīms.
- ⚠ Pacientu jutība pret aukstumu ir atšķirīga. Regulāri pārbaudiet, vai pacients jūtas ērti.
- ⚠ Terapijas manšetes izvēlas veselības aprūpes speciālists.
- ⚠ Uzliekot terapijas manšeti, tā nedrīkst būt pārāk cieša, jo tādējādi var ierobežot asins vai ķermeņa šķidrumu plūsmu.
- ⚠ Izmantojiet tikai Zenith Technical Innovations apstiprinātas terapijas manšetes.
- ⚠ Terapijas manšetes nav sterilas. Nelieciet tās tieši uz atklātām brūcēm, čūlām, izsitumiem, infekcijām vai šuvēm.
- ⚠ Vairākiem pacientiem paredzētās manšetes ir jātīra un jādezinficē, kā norādīts katras manšetes lietošanas

instrukcijas sadaļā par tīrīšanu. Izmantojot ierīci vairākiem pacientiem bez pienācīgas tīrīšanas un dezinfekcijas, pastāv infekcijas risks.

- ⚠ Pirms katras procedūras ir jāpārbauda, vai manšetes ir tīras un nav bojātas. Nelietojiet manšeti, ja tai ir bojājumu pazīmes, jo tai var rasties sūces. Ja manšete ir netīra, notīriet to, kā norādīts katras manšetes lietošanas instrukcijas sadaļā par tīrīšanu.
- ⚠ Nekādā gadījumā nemēģiniet sterilizēt terapijas manšeti.
- ⚠ Pārsēji, ko izmanto zem terapijas manšetes nedrīkst būt pārāk cieši.
- ⚠ Neļaujiet terapijas manšetei saskarties ar asiem priekšmetiem, kas to varētu pārdurt.
- ⚠ Nekavējoties pārtrauciet kompresijas terapiju, ja rodas diskomforta sajūta, nejutīgums vai ekstremitātes tirpšana.
- ⚠ Lietojot ierīci, katru stundu jāpārbauda ādas stāvoklis, lai pārliecinātos, vai nav radies pastiprināts apsārtums, krāsas izmaiņas, nieze, pietūkums, tulznas, kairinājums un citas izmaiņas. Ja rodas neparasti apstākļi, nekavējoties pārtrauciet lietot Therm-X un sazinieties ar ārstu.
- ⚠ Īpaši piesardzīgi lietojiet bērniem līdz 12 gadu vecumam vai pacientiem ar jebkuru no tālāk norādītajiem stāvokļiem: hiperkoagulācijas traucējumi, diabēts, neiropātijas, artrīts, diabēta perifēro asinsvadu slimības un samazināta ādas jutība.
- ⚠ Pirms uzlikšanas uz ādas pārbaudiet, vai terapijas manšete nav mitra. Pirms lietošanas noslaukiet mitrumu.
- ⚠ Pacientiem ar jebkuru no tālāk norādītajiem stāvokļiem Therm-X temperatūras terapija jālieto ārstu uzraudzībā:
 - sāpju nejutīgas ekstremitātes;
 - ļoti zems asinsspiediens;
 - Reino slimība;
 - paaugstināta jutība pret aukstumu;
 - bērni, kas jaunāki par 12 gadiem;
 - diabēta slimnieki;
 - pacienti ar invaliditāti;
 - samazināta ādas jutība;
 - slikta cirkulācija;
 - vēnu nosiešana vai nesen veiktas ādas transplantācijas.

- ⚠ Nelietojiet manšetes atklātās liesmas tuvumā.
- ⚠ Nesmēķējiet, lietojot terapijas manšetes.
- ⚠ Ievērojiet visas brīdinājuma un piesardzības uzlīmes. Nekad nenoņemiet etiķetes.
- ⚠ BRĪDINĀJUMS: Lietojiet piesardzīgi. Var izraisīt nopietnus apdegumus. Nelietot uz jutīgām ādas zonām vai vājas asinsrites gadījumā. Therm-X lietošana bez uzraudzības bērniem vai personām ar invaliditāti var būt bīstama.

IETEICAMĀ LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

- Salokiet manšetes tā, lai šķidruma kameras atrastos iekšpusē.
- Lietot 15,6 °C–26,7 °C temperatūrā, mitruma līmenim nepārsniedzot 60 %.
- Uzglabāt 0,6 °C–50,0 °C temperatūrā, mitruma līmenim nepārsniedzot 60 %.
- Lietot un uzglabāt pie atmosfēras spiediena no 700 hPa līdz 1060 hPa (atbilst maksimālajam augstumam 3000 m).

TĪRĪŠANA

Ja manšetes tiek izmantotas vienam pacientam, tās ir jātīra pēc katras lietošanas reizes. Ierīci nekad nedrīkst izmantot vairākiem pacientiem bez pienācīgas tīrīšanas un dezinfekcijas.

Lai notīrītu manšeti, kas paredzēta **lietošanai vienam pacientam**, jāveic tālāk norādītās darbības:

- 1) Therm-X manšetes iekšējās virsmas (puse, kas nonāk saskarē ar pacientu) jānoslauka ar bezplūksnu drānu, kas samitrināta silta ūdens un saudzīga mazgāšanas līdzekļa šķīdumā, notīrot visus redzamos netīrumus.
- 2) Lai notīrītu manšeti un likvidētu visas mazgāšanas līdzekļa paliekas, jāizmanto otra bezplūksnu drāna, kas samitrināta vēsā krāna ūdenī.
- 3) Pirms nākamās lietošanas reizes manšetēm jāļauj dabiski nožūt. Tās nedrīkst mazgāt veļasmašīnā, ne arī ievietot veļas žāvētājā.

Lai notīrītu un dezinficētu manšeti, kas paredzēta **lietošanai vairākiem pacientiem**, jāveic tālāk norādītās darbības:

- 1) Ar Cavicide Spray jāapsmidzina Therm-X manšetes iekšējās virsmas (puse, kas nonāk saskarē ar pacientu), lai tās būtu pilnībā samitrinātas 1 minūti.
- 2) Pēc 1 minūtes ilgas iedarbības manšete jānoslauka ar tīru bezplūksnu drānu, notīrot visus redzamos netīrumus.
- 3) Ar Cavicide Spray jāapsmidzina Therm-X manšetes iekšējās virsmas, lai tās būtu pilnībā samitrinātas 5 minūtes.
- 4) Pēc 5 minūšu ilgas iedarbības manšete jānoslauka ar tīru bezplūksnu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, lai notīrītu dezinfekcijas līdzekļa paliekas. (Piezīme: bezplūksnu drānai jābūt mitrai, bet ne pārāk slapjai, lai tā nepilētu.)
- 5) Pirms nākamās lietošanas reizes manšetēm jāļauj dabiski nožūt. Tās nedrīkst mazgāt veļasmašīnā, ne arī ievietot veļas žāvētājā.

MANŠEŠU SAGATAVOŠANA


- 1) Izņemiet izstrādājumu no iepakojuma.
- 2) Pirms lietošanas pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts.
- 3) Pirms lietošanas pārbaudiet, vai izstrādājums ir tīrs, un, ja tas ir netīrs, notīriet to, kā norādīts sadaļā par tīrīšanu.

MANŠEŠU SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

- 1) Pievienojiet izturīgo manšeti lokanajai šļūtenei, izmantojot vienpakāpes ātrās savienošanas savienotājelementus.
- 2) Piepildiet tvertni ar apstiprinātu Therm-X dzesēšanas šķīdumu.
- 3) Pievienojiet lokano šļūteni Therm-X ierīcei.
- 4) Pievienojiet Therm-X ierīci kontaktligzdai, lai sāktos pirmsdzesēšanas cikls un tiktu uzsākta tukšās manšetes uzpilde.
- 5) Atkārtojiet 4. darbību, atvienojot un atkārtoti pievienojot barošanas avotu, līdz manšetes dzesēšanas šķīduma kamerā gaisa ir ļoti maz vai tā nav vispār.


MANŠEŠU UZLIKŠANA

Muguras manšete (TX0105)

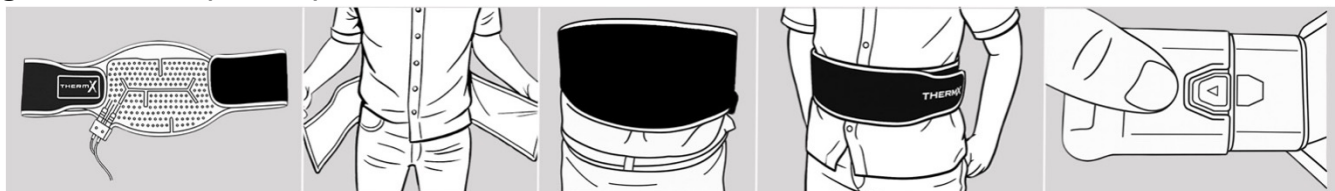


- 1) Izpakoiet muguras manšeti un novietojiet to plakaniski, dzesēšanas šķīduma kamerai esot vērstai uz augšu.
- 2) Aptiniet muguras manšeti ap vidukli tā, lai trīs zaru savienotājs būtu vērsti pret zemi no labā gurna.
- 3) Pielāgojiet dzesēšanas zonu atbilstoši vēlamajai procedūras zonai.
- 4) Cieši aiztaisiet "Velcro" līplentes aizdari ap vidukli, lai manšete turētos savā vietā.
- 5) Pievienojiet manšeti lokanajai šļūtenei, ievietojot trīs manšetes zarus šļūtenē. Spiediet, līdz atskan klikšķis.
- 6) Ieteicamais maksimālais spiediena iestatījums: Low (zems)

Gurna manšete (TX0108)

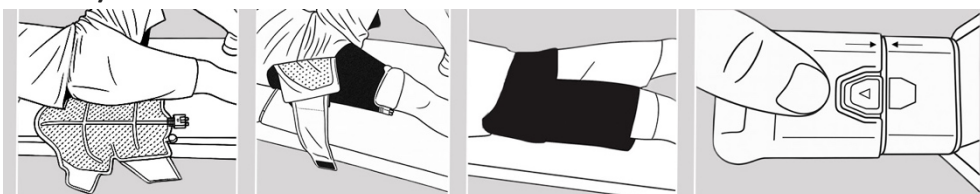


- 1) Kamēr pacients guļ uz muguras, iebīdīt manšeti zem gurna tā, lai savienotājs būtu vērsti pret pirkstgaliem. Cieši aiztaisiet augšstilbu siksnas ap augšstilbu. Pārliecinieties, ka savienotājs atrodas uz leju pret gūžas viduslīniju, lai viss būtu pareizi novietots.
- 2) Cieši aiztaisiet vidukļa siksnas ap rumpi. Salokiet zem manšetes visas liekās siksnas tā, lai dzesēšanas šķīduma kamera netiktu pārklāta.
- 3) Pievienojiet manšeti lokanajai šļūtenei, ievietojot trīs manšetes zarus šļūtenē. Spiediet, līdz atskan klikšķis.
- 4) Ieteicamais maksimālais spiediena iestatījums: Low (zems)

Ceļa maņšete (TX0102)

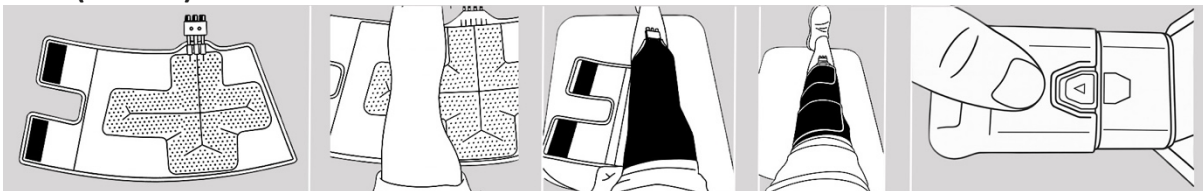


- 1) Izpakojiēt ceļa maņšeti un novietojiet to plakaniski, dzesēšanas šķidrums kamerai esot vērstai uz augšu.
- 2) Novietojiet kāju uz dzesēšanas kameras tā, lai ātrie savienotāji ar trim zariem būtu vērsti pret pirkstgaliem.
- 3) Cieši aptiniet maņšetes pārpalikumu ap kāju, vienlaikus novietojot plastmasas savienotāju vienā līnijā ar apakšstilbu.
- 4) Cieši pārvelciet siksnas pāri ceļa maņšetes augšdaļai un nofiksējiet "Velcro" līplentes aizdaru vietā.
- 5) Pievienojiet maņšeti lokanajai šļūtenei, ievietojot trīs maņšetes zarus šļūtenē. Spiediet, līdz atskan klikšķis.
- 6) Ieteicamais maksimālais spiediena iestatījums: High (augsts)

Potītes maņšete (TX0104)

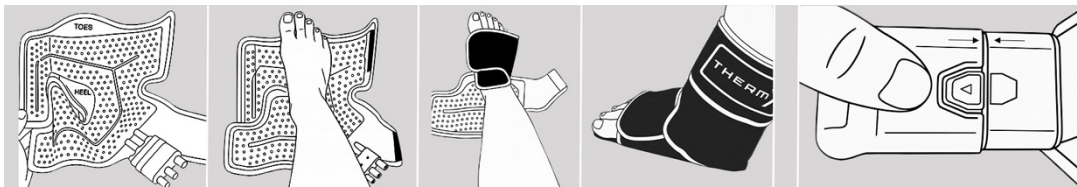


- 1) Izpakojiēt maņšeti tā, lai tā būtu novietota kā zābaks, dzesēšanas šķidrums kamerai esot vērstai uz augšu.
- 2) Novietojiet kāju un pēdu uz dzesēšanas kameras tā, lai pirkstgali atrastos virs uzraksta "toes" (pirkstgali) un papēdis – virs uzraksta "heel" (papēdis).
- 3) Cieši pārvelciet maņšetes mazāko atloku pāri pēdas augšdaļai un cieši nofiksējiet "Velcro" līplentes aizdaru.
- 4) Cieši pārvelciet maņšetes lielāko atloku ap ikru/apakšstilbu un cieši nofiksējiet "Velcro" līplentes aizdaru.
- 5) Pievienojiet maņšeti lokanajai šļūtenei, ievietojot trīs maņšetes zarus šļūtenē. Spiediet, līdz atskan klikšķis.
- 6) Ieteicamais maksimālais spiediena iestatījums: High (augsts)

Apakšstilba maņšete (TX0111)

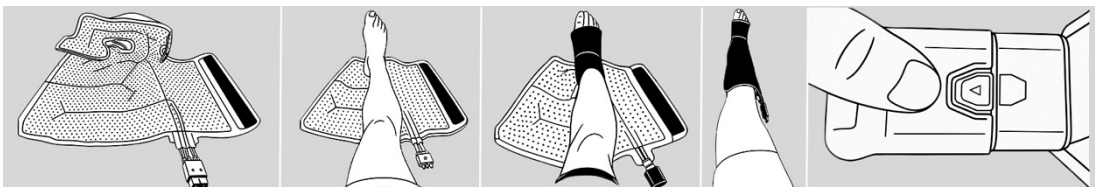


- 1) Izpakojiēt maņšeti tā, lai tā būtu novietota kā zābaks, dzesēšanas šķidrums kamerai esot vērstai uz augšu.
- 2) Novietojiet pēdu uz dzesēšanas kameras tā, lai pirkstgali atrastos virs uzraksta "toes" (pirkstgali) un papēdis – virs uzraksta "heel" (papēdis).
- 3) Cieši pārvelciet maņšetes atloku ar marķējumu "1" ap pēdu un cieši nofiksējiet "Velcro" līplentes aizdaru.
- 4) Cieši pārvelciet maņšetes atloku ar marķējumu "2" ap ikru un cieši nofiksējiet "Velcro" līplentes aizdaru.
- 5) Pievienojiet maņšeti lokanajai šļūtenei, ievietojot trīs maņšetes zarus šļūtenē. Spiediet, līdz atskan klikšķis.
- 6) Ieteicamais maksimālais spiediena iestatījums: High (augsts)

Pleca maņšete (TX0101) / XL pleca maņšete (TX0110)

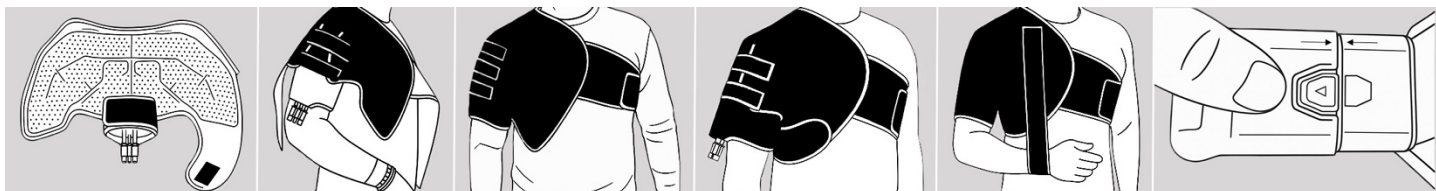


- 1) Aiztaisiet augšdelma "Velcro" līplentes aizdaru izveidojot apli un atveri, caur kuru var ievietot augšdelmu.
- 2) Izbidiet roku caur auduma cilpu. Pielāgojiēt "Velcro" līplentes siksnu, lai pārliecinātos, ka tā cieši pieguļ ap bicepsu.
- 3) Aiztaisiet abas siksnas zem pretējās rokas un ap krūtīm. Pārliecinieties, ka siksnas cieši pieguļ.
- 4) Piestipriniet savienotāja siksnu zem rokas. Pārliecinieties, ka tā cieši pieguļ un nespiež padusi.
- 5) Atkārtoti noregulējiēt abas savienotājās siksnas pāri deltveida muskulim, lai panāktu vēlamu piegulšanu. Ja vēlaties, ievietojiet plauksta locītavu papildu plauksta locītavas siksnā un piestipriniet brīvo galu pie "Velcro" līplentes aizdares virs krūtīm.
- 6) Pievienojiet maņšeti lokanajai šļūtenei, ievietojot trīs maņšetes zarus šļūtenē. Spiediet, līdz atskan klikšķis.
- 7) Ieteicamais maksimālais spiediena iestatījums: Low (zems)

Elkoņa manšete (TX0103)

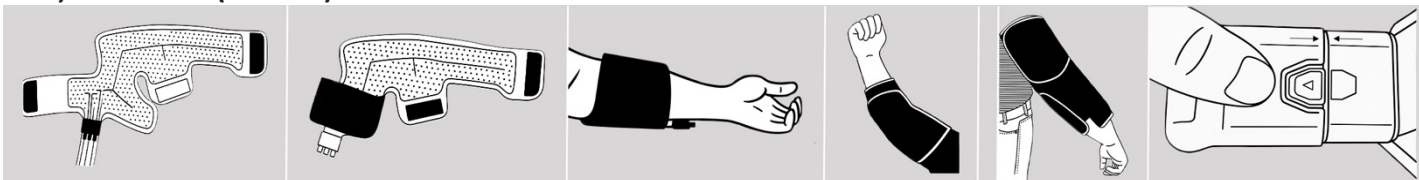

- 1) Izpakoļiet elkoņa manšeti un novietojiet to plakaniski, dzesēšanas šķidrums kamerai esot vērstai uz augšu.
- 2) Pārvelciet siksnu ar marķējumu "1" ap roku, sastiprinot atlokus un izveidojot vietu apakšdelmam.
- 3) Ievietojiet roku manšetē tā, lai trīs zaru savienotājs atrastos labā apakšdelma augšpusē vai kreisā apakšdelma apakšpusē atkarībā no tā, kura roka tiek ārstēta (skatīt attēlus augstāk). Pārliecinieties, ka apakšdelma siksnas cieši pieguļ.
- 4) Nedaudz salieciet elkoni, pārvelciet garāko siksnu ar marķējumu "2" ap bicepsu, pārliecinoties, ka siksnas cieši pieguļ.
- 5) Piestipriniet atlikušo atloku pie "Velcro" līplentes aizdares uz apakšdelma.
- 6) Pievienojiet manšeti lokanajai šļūtenei, ievietojot trīs manšetes zarus šļūtenē. Spiediet, līdz atskan klikšķis.
- 7) Ieteicamais maksimālais spiediena iestatījums: Medium (vidējs)

Rokas manšete (TX0112)

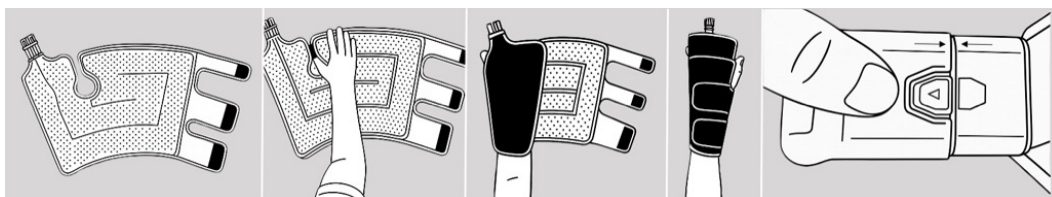

- 1) Izpakoļiet manšeti tā, lai tā būtu novietota plakaniski, dzesēšanas šķidrums kamerai esot vērstai uz augšu.
- 2) Salokiet manšeti uz pusēm, dzesēšanas šķidrums kamerai esot vērstai uz iekšpusi. Cieši nofiksējiet "Velcro" līplentes aizdares siksnas ap malām, lai manšete turētos savā vietā.
- 3) Lai veiktu procedūru, ievietojiet roku manšetē.
- 4) Pievienojiet manšeti lokanajai šļūtenei, ievietojot trīs manšetes zarus šļūtenē. Spiediet, līdz atskan klikšķis.
- 5) Ieteicamais maksimālais spiediena iestatījums: Medium (vidējs)

MANŠEŠU NOŅEMŠANA UN NOMAĪŅA

Nospiediet sarkano pogu, lai atvienotu manšeti no šļūtenes. Atveriet "Velcro" līplentes aizdares siksnas un noņemiet manšeti no ķermeņa. Pievienojiet jauno manšeti.

MANŠEŠU IZMĒRI

Manšete	Zona	Izmēru diapazons
Mugura	Vidukļa apkārtmērs	0,56–1,37 m
Gurns	Gurna platums	0,66–1,27 m
Celis	Maksimālais garums	0,41 m
	Maksimālais augšdaļas apkārtmērs	0,89 m
	Maksimālais apakšdaļas apkārtmērs	0,69 m
Potīte	Maksimālais apavu izmērs	ES 52
Apakšstilba manšete	Apakšstilba apkārtmērs	0,51 m

Manšete	Zona	Izmēru diapazons
Plecs	Krūšu apkārtmērs	0,90–1,40 m
XL plecs	Krūšu apkārtmērs	1,09–1,65 m
Elkonis	Bicepsa apkārtmērs	0,48 m
	Apakšdelma apkārtmērs	0,41 m
Roka	No pirkstgaliem līdz plaukstas locītavai	0,36 m
	Plaukstas platums	0,28 m

BIOLOĢISKĀ SADERĪBA

Materiāls, kas nonāk saskarē ar ādu, ir pārbaudīts, lai tas atbilstu bioloģiskās saderības prasībām saskaņā ar ISO 10993.

UTILIZĀCIJA

Pēc lietošanas izstrādājums jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.



GARANTĪJA

Šai manšetei tiek piemērota ierobežota sešu mēnešu garantija. Šīs manšetes garantijas noteikumus, nosacījumus un ierobežojumus varat atrast Therm-X ierīces lietošanas instrukcijā. **CITAS TIEŠĀS VAI NETIEŠĀS GARANTIJAS NAV PIEMĒROJAMAS.** Šīs garantijas kopiju var iegūt arī tiešsaistē vietnē thermxtherapy.com vai nosūtot e-pasta ziņojumu uz customerservice@thermxtherapy.com.

APKOPE UN KLIENTU ATBALSTS

Ziņojot par problēmām, papildus attiecīgajai brīdinājuma informācijai, ja tāda ir, ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim un jūsu valsts iestādei norādiet mašīnes unikālo identifikācijas numuru (piemēram, S/N) (kā norādīts uz "trīs vienā" savienotāja etiķetes).

Lai saņemtu apkopes pakalpojumus, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties šo produktu, un norādiet mašīnes unikālo identifikācijas numuru (piemēram, S/N) (kā norādīts uz "trīs vienā" savienotāja etiķetes).

	<p>Zenith Technical Innovations, LLC 1396 St. Paul Ave. Gurnee, IL 60031 USA</p> <p>customerservice@thermtherapy.com +1.847.672.7481</p>	 <p>MedEnvoy Global B.V. Prinses Margrietplantsoen 33 Suite 123 2595 AM The Hague The Netherlands</p> <p>vigilance@medenvoyglobal.com +31.70.326.21.48</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="1317 1713 1409 1766">EU</td><td data-bbox="1409 1713 1502 1766">REP</td></tr></table>	EU	REP
EU	REP				