

ISTRUZZJONIJIET GĦALL-ILBIES DURABBLI

Dawn l-istruzzjonijiet għall-użu (IFU) huma parti integrali mill-prodott u jiddeskrivu kif għandu jintuża b'mod sigur skont l-iskop tiegħu. Aqra dawn l-IFU qabel tuża dan il-prodott u żomm l-IFU mal-prodott sabiex ikunu aċċessibbli l-hin kollu.

UŻU MAĦSUB

Therm-X AT huwa maħsub għall-ghoti ta' terapija ta' kesħa, ta' šhana, ta' kuntrast u ta' kompressjoni lill-pazjenti li huma indikati għalihom dawn it-terapiji.

INDIKAZZJONIJIET GĦALL-UŻU

L-Ilbies Durabbli (għad-dahar, għall-ġenb, għall-irkoppa, għall-għaksa, għan-nofs tas-sieq, għall-ispalla, għall-ispalla XL, għall-minkeb u għall-id) huma komponenti tas-sistema Therm-X. Therm-X AT jiġbor fih terapija ta' kesħa, ta' šhana, ta' kuntrast u ta' kompressjoni. Therm-X huwa maħsub biex jitratta l-korrimenti ta' wara l-operazzjonijiet u l-korrimenti akuti billi jnaqqas l-edema, l-infiħ u l-uġiġħ li jistgħu jitjiebu bit-terapiji tal-kesħa u tal-kompressjoni. Huwa maħsub biex jitratta l-kundizzjonijiet mediċi u/jew kirurġiċi ta' wara trawma jew wara l-operazzjonijiet u li tkun indikata għalihom terapija termali (šhana jew kesħa) lokalizzata.

Therm-X AT huwa maħsub biex jintuża minn, jew wara li jiġi ordnat minn, professjonisti tal-kura tas-saħħa bil-liċenzja fi stabbilimenti tar-riabilitazzjoni, fil-polikliniċi jew f'postijiet għat-taħriġ tal-atleti.

POPOLAZZJONI INTIŻA

Therm-X AT huwa indikat għal pazjenti minn 12-il sena 'l fuq.

UTENTI INTIŻI

Therm-X AT huwa maħsub biex jintuża minn, jew wara li jiġi ordnat minn, professjonisti tal-kura tas-saħħa bil-liċenzja fi stabbilimenti tar-riabilitazzjoni, fil-polikliniċi jew f'postijiet għat-taħriġ tal-atleti.

BENEFIĊĠI KLINIĊI

Therm-X AT inaqqas l-edema, l-infiħ u l-uġiġħ billi jipprovdi terapija ta' šhana, ta' kesħa, ta' kuntrast u/jew ta' kompressjoni lil pazjenti b'korrimenti muskuloskeletalri akuti, korrimenti postrawmatiki, jew f'irkupru mediku (Wara l-Kirurġija). Fejn xieraq, l-apparat Therm-X AT jista' jintuża minflok silġ, pads li jsaħħnu, kalzetti tal-kompressjoni jew trattamenti simili biex jiprovdi kontroll termali u tal-kompressjoni aktar konsistenti u kontinwu.


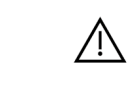



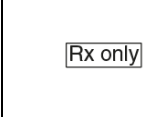



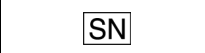

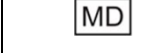



DESKRIZZJONI

L-ilbies durabbli huwa tgeżwir li jintefaħ li jista' jintuża minn diversi pazjenti u li huwa maħsub għat-trattament termali tal-ġisem. L-ilbies termali durabbli huwa lbies flessibbli li jiċċirkola l-aġent li jkessaħ li jitqiegħed mal-ġisem biex jiprovdi terapija ta' kesħa, ta' šhana jew ta' kuntrast flimkien ma' kompressjoni pneumatica.

NUMRI TAL-MUDELLI

Ilbies għad-Dahar	TX0105	Ilbies għall-Għaksa	TX0104	Ilbies għall-Spalla XL	TX0110
Ilbies għall-Ġenbejn	TX0108	Ilbies għan-Nofs tas-Sieq	TX0111	Ilbies għall-Minkeb	TX0103
Ilbies għall-Irkoppa	TX0102	Ilbies għall-Ispalla	TX0101	Ilbies għall-Id	TX0112

SIMBOLI U ABBREVJAZZJONIJIET FUQ IL-PRODOTT U L-IMBALLAĠĠ

Simbolu/Terminu	Sinifikat	Simbolu/Terminu	Sinifikat	Simbolu/Terminu	Sinifikat
	Tikketta ta' identifikazzjoni		Attenzjoni! Aqra l-istruzzjonijiet għall-Użu għal informazzjoni ta' twissija importanti.		Rappreżentant tal-UE (Rappreżentant Awtorizzat fil-Komunità Ewropea)
	Marka CE - Konformità Ewropea		Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu		Attenzjoni: Il-liġi federali tillimita dan l-apparat għall-bejgħ minn tabib jew fuq l-ordni ta' tabib
	Numru tal-prodott		Manifattur		Numru tal-lott
	Numru tas-serje		Data tal-Manifattura		Apparat Mediku
	Ikkonsulta l-istruzzjonijiet għall-użu		Parti applikata tat-tip BF		Identifikatur Uniku tal-Apparat

KONTRAIKAZZJONIJET

It-terapija ta' kompressjoni Therm-X m'għandhiex tintuża minn pazjenti li jkollhom xi waħda mill-kundizzjonijiet pre-eżistenti li ġejjin:

- Evidenza preżuntiva ta' insuffiċjenza kongestiva tal-qalb
- Kundizzjonijiet pre-eżistenti ta' DVT
- Trombozi venali akuta profonda (Flebotrombozi)
- Proċess infjammatorju ta' flebite
- Episodji ta' emboliżmu pulmonari jew sinjali oħra ta' emboliżmu
- Edema pulmonari
- Infjammazzjoni akuta tal-vini (Tromboflebite)
- Insuffiċjenza kardijaka dekompensata
- Disregolazzjoni arterjali
- Erysipelas
- Kanċer u metastasi tal-kanċer fl-estremità affettwata
- Iper-tonija dekompensata
- Mard jew infezzjoni infjammatorja akuta tal-ġilda
- Mard okklużiv tal-vini jew l-arterji
- Mhux mixtieq ir-ritorn venuż jew limfatiku
- Ċirkolazzjoni periferali fqira
- Arterjosklerozi severa jew infezzjoni attiva
- Iper-tonija dekompensata fir-reġjun affettwat
- Indeboliment vaskulari li huwa sinifikanti fiż-żona affettwata
- Diskrasiji ematoloġiċi li jaffettwaw it-trombozi

It-terapija termali Therm-X m'għandhiex tintuża minn pazjenti li jkollhom xi waħda mill-kundizzjonijiet pre-eżistenti li ġejjin:

- Il-fenomeni ta' Raynaud jew kundizzjonijiet vasospastiċi oħra
- Allergija għall-kesha
- Disturbi tal-agglutinina kiesha
- Ipersensittività għall-kesha jew għas-sħana
- Storja ta' korrimient mill-kesha
- Mard kardjovaskulari sever
- Ġilda anestetika, disturbi ta' iperkoagulazzjoni
- Ċirkolazzjoni fqira
- Estremitàjiet sensitivi għall-uġiġħ
- Pressjoni tad-demem estremament baxxa li twassal għal inkapaċità
- Sensittività tal-ġilda mnaqqsa
- Ligazzjoni tal-vini jew trapjanti tal-ġilda reċenti
- Feokromocitoma

TWISSIJET/PREKAWZJONIJET

- ⚠ Tużax l-apparat mingħajr riċetta tat-tabib.
- ⚠ Segwi l-istruzzjonijiet li tak il-professjonist tiegħek għall-kors(ijiet), iż-żona, il-frekwenza u t-tul tat-trattament.
- ⚠ Professjonist tal-kura tas-saħħa liċenzjat għandu jagħżel il-kors korrett li għandu jintuża.
- ⚠ Is-sensittività għall-kesha tvarja minn pazjent għal ieħor. Aġġmel kontrolli regolari fuq il-kumdità tal-pazjent.
- ⚠ L-ilbies tat-terapija għandu jintgħażel minn professjonist tal-kura tas-saħħa.
- ⚠ Tapplikax l-ilbies tat-terapija b'mod tant issikkat li jillimita l-fluss tad-demem jew tal-fluwidu.

- ⚠ Uża biss ilbies tat-terapija approvat minn Zenith Technical Innovations.
- ⚠ L-ilbies terapewtiku mhuwiex sterili. M'għandekx tqiegħdu direttament fuq feriti miftuħa, selhiet, raxx, infezzjonijiet jew punti.
- ⚠ Ilbies li jintuża minn ħafna pazjenti għandu jtnaddaf u jiġi diżinfettat kif deskritt fis-sezzjoni tat-tindif ta' kull IFU tal-ilbies. L-użu tal-ilbies fuq diversi pazjenti mingħajr tindif u diżinfekzjoni xierqa jista' jwassal għal riskji ta' infezzjoni.
- ⚠ L-ilbies għandu jiġi spezzjonat għall-indafa u l-ħsara għal kull trattament. Tużax l-ilbies jekk ikun hemm sinjali ta' ħsara peress li l-ilbies jista' jnxxi. Jekk l-ilbies ikun maħmuġ, naddfu kif indikat fis-sezzjoni tat-tindif ta' kull IFU tal-ilbies.
- ⚠ Tippruvax tisterilizza l-ilbies tat-terapija bi kwalunkwe mod.
- ⚠ Il-garzi użati taħt l-ilbies tat-terapija għandhom jiġu applikati ħafif.
- ⚠ Thallix li l-ilbies tat-terapija jmiss ma' oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta li jistgħu jtaqqbuh.
- ⚠ Waqqaf it-terapija ta' kompressjoni immedjatament jekk ikollok xi sensazzjoni ta' skumdità, tneħħim jew tingiż fid-dirgħajn jew fir-riglejn.
- ⚠ Waqt li tuża l-apparat, għandek tiċċekkja l-kundizzjoni tal-ġilda kull siegħa għal żieda fil-ħmura, tibdil fil-kulur, ħakk, neffha, infafet, irritazzjoni u bidliet oħra. Jekk iseħħu xi kundizzjonijiet mhux tas-soltu, ieqaf uża Therm-X immedjatament u kkuntattja lit-tabib tiegħek.
- ⚠ Uża prekawzjonijiet speċjali għal tfal taħt it-12-il sena jew pazjenti b'xi waħda minn dawn li ġejjin: disturbi ta' iperkoagulazzjoni, dijabete, newropatiji, kundizzjonijiet artritiċi, mard vaskulari periferali tad-dijabete, u sensitività tal-ġilda mnaqqsa.
- ⚠ Iċċekkja għall-umdità fuq l-ilbies tat-terapija qabel ma tpoġġih fuq il-ġilda. Neħħi kwalunkwe umdità qabel l-użu.
- ⚠ Il-pazjenti b'xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin għandhom jużaw Therm-X għal terapija tat-temperatura taħt is-superviżjoni ta' tabib:
 - Estremitàjiet mhux sensitivi għall-uġiġħ
 - Pressjoni tad-demem estremament baxxa
 - Il-marda ta' Raynaud
 - Ipersensittività għall-kesha
 - Tfal taħt it-12-il sena
 - Dijabetiċi
 - Pazjenti inabilitati
 - Sensittività tal-ġilda mnaqqsa
 - Ċirkolazzjoni fqira
 - Ligazzjoni tal-vini jew trapjanti tal-ġilda reċenti
- ⚠ M'għandekx tuża l-ilbies ħdejn fjammi mikxufa.
- ⚠ M'għandekx tpejjeq waqt li l-ilbies tat-terapija jkun qed jintuża.
- ⚠ Osserva t-tikketti kollha ta' twissija u kawtela. Qatt m'għandek tneħħi t-tikketti.
- ⚠ TWISSIJA: Uża b'attenzjoni. Jista' jikkawża ħruq serju. Tużax fuq żoni sensitivi tal-ġilda jew fil-preżenza ta' ċirkolazzjoni fqira. L-użu mhux sorveljat ta' Therm-X minn tfal jew persuni inabilitati jista' jkun perikoluż.

UŻU U HAŻNA RAKKOMANDATI

- Itwi l-ilbies 'il fuq b'tali mod li l-bużżieqa tal-fluwidu tkun fuq ġewwa.
- Uża f'temperatura ta' bejn 15.6°C-26.7°C u f'umdità ta' taħt is-60%.
- Aħżen f'temperatura ta' bejn 0.6°C – 50.0°C u f'umdità ta' taħt is-60%.
- Uża u Aħżen f'pressjoni atmosferika ta' bejn 700 hPa u 1060 hPa (tikkorrispondi għal elevazzjoni massima ta' 3,000 m).

TINDIF

L-ilbies għandu jtnaddaf wara kull użu meta jintuża ma' pazjent wiehed. L-ilbies qatt m'għandu jintuża fuq diversi pazjenti mingħajr tindif u diżinfizzjoni xierqa.

Biex tnaddaf l-ilbies għall-**użu minn pazjent wiehed**, għandhom jittieħdu l-passi li ġejjin:

- 1) L-uċuħ ta' ġewwa (in-naħa li tiġi f'kuntatt mal-pazjent) tal-ilbies Therm-X għandhom jintmesħu b'carruta mingħajr tnetex imxarrba b'soluzzjoni ta' ilma sħun u detergent ħafif biex titneħħa l-ħmieġ viżibbli kollu.
- 2) Għandha tintuża carruta oħra mingħajr tnetex imxarrba b'ilma frisk tal-vit biex jintmesaħ l-ilbies ħalli jitneħħew ir-residwi kollha tad-deterġent.
- 3) L-ilbies għandu jtnixxef bl-arja qabel l-użu li jmiss, u m'għandux jinħasel fil-magna tal-ħasil jew jitqiegħed f'dryer.

Biex tnaddaf u tiddizinfetta l-ilbies għall-**użu minn diversi pazjenti**, għandhom jittieħdu l-passi li ġejjin:

- 1) L-isprej Cavicide għandu jintuża biex jiġu sprejjati l-uċuħ ta' ġewwa (in-naħa li tiġi f'kuntatt mal-pazjent) tal-ilbies Therm-X sabiex ikunu mxarrba sew għal minuta.
- 2) Wara minuta ta' kuntatt, l-ilbies għandu jintmesaħ b'carruta nadifa mingħajr tnetex biex jitneħħa l-ħmieġ viżibbli kollu.
- 3) L-isprej Cavicide għandu jintuża biex jiġu sprejjati l-uċuħ ta' ġewwa tal-ilbies Therm-X sabiex ikunu mxarrba sew għal 5 minuti.
- 4) Wara 5 minuti ta' kuntatt, l-ilbies għandu jintmesaħ b'carruta nadifa mingħajr tnetex imxarrba b'ilma sħun biex jitneħħew il-fdalijiet tad-dizinfettant (Nota: iċ-ċarruta mingħajr tnetex għandha tkun imxarrba, iżda mhux tqattar).
- 5) L-ilbies għandu jtnixxef bl-arja qabel l-użu li jmiss, u m'għandux jinħasel fil-magna tal-ħasil jew jitqiegħed f'dryer.

TĦEJJJA TAL-ILBIES


- 1) Oħroġ il-prodott mill-imballaġġ,
- 2) Iċċekkja l-prodott għal ħsara qabel l-użu,
- 3) Qabel tużah, iċċekkja l-indafa tal-prodott u, jekk ikun maħmuġ, naddfu kif indikat fis-sezzjoni tat-tindif.

PRAJMING TAL-ILBIES

- 1) Qabbad l-ilbies durabbli mal-pajp umbilikal billi tuża l-fittings ta' konnessjoni rapida f'pass wiehed.
- 2) Imla t-tank bil-fluwidu berried Therm-X approvat.
- 3) Qabbad il-pajp umbilikal mal-apparat Therm-X.
- 4) Qabbad l-apparat Therm-X ma' plakka tal-elettriku biex iċ-ċiklu ta' tkessiħ minn qabel ikun jista' jibda jmla l-ilbies vojta.
- 5) Irrepeti l-pass 4 billi tiskonnettja u terġa' tqabbad il-provvista tad-dawl sakemm l-ilbies ikollu ftit arja jew l-ebda arja fil-bużżieqa tal-fluwidu berried.


APPLIKAZZJONI TAL-ILBIES

Ilbies għad-Dahar (TX0105)

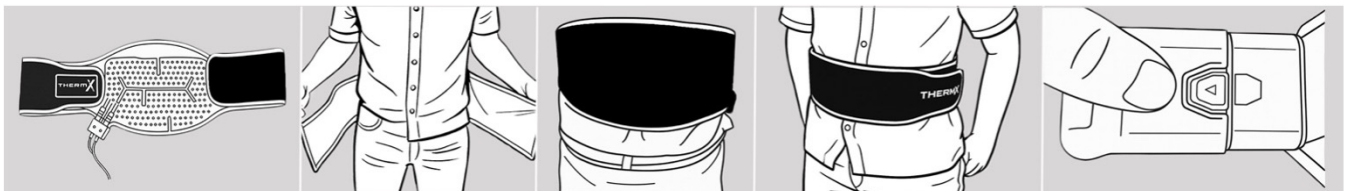

- 1) Neħħi l-ilbies imgeżwer u poġġi l-ilbies fuq dahru ċatt bil-bużżieqa tal-fluwidu berried thares 'il fuq.
- 2) Geżwer l-ilbies lura madwar il-qadd bil-konnettur bi 3 prongs ippuntati 'l isfel mill-ġenb tal-lemin.
- 3) Aġġusta ż-żona tat-tkessiħ biex toqgħod fuq iż-żona tat-ttrattament mixtieqa.
- 4) Orbot il-Velcro sew madwar il-qadd biex l-ilbies jibqas 'sospiz f'postu.
- 5) Qabbad l-ilbies mal-pajp umbilikal billi ddaħħal it-tliet prongs tal-ilbies fil-pajp. Aġħfas sakemm tisma' "klikk".
- 6) Setting rakkomandat tal-pressjoni massima: Baxxa


Ilbies għall-Ġenbejn (TX0108)

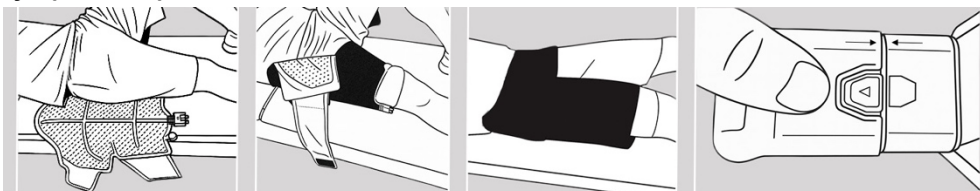

- 1) Bil-pazjent mimdud ċatt, żerżaq l-ilbies taħt il-ġenb bil-konnettur ippuntat lejn is-swaba' tas-saqajn. Orbot iċ-ċineg tal-koxox sew madwar il-parti ta' fuq tas-sieq. Kun żgur li l-konnettur ikun fil-linja tan-nofs tal-ġenb b'tali mod li kollox ikun allinjat kif support.


- 2) Orbot iċ-ċineg tal-qadd sew madwar it-torso. Daħhal kwalunkwe ċinga żejda taħt b'tali mod li l-bużżieqa tal-fluwidu berried ma tkunx mgħottija.
- 3) Qabbad l-ilbies mal-pajp umbilikali billi ddaħhal it-tliet prongs tal-ilbies fil-pajp. Aghfas sakemm tisma' "klikk".
- 4) Setting Rakkomandat tal-Pressjoni Massima: Baxxa

Ilbies għall-Irkoppa (TX0102)

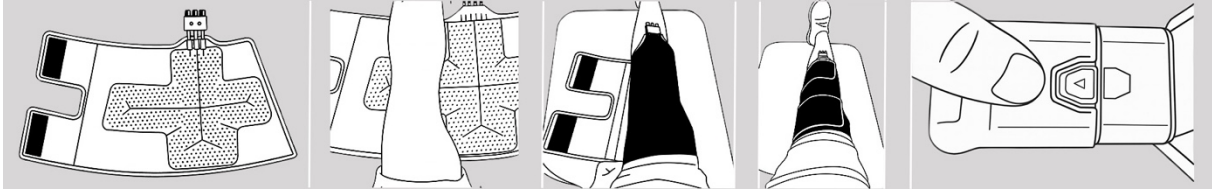


- 1) Nehhi t-tgeżwir u poġgi l-ilbies tal-irkoppa ċatt bil-bużżieqa tal-fluwidu berried thares 'il fuq.
- 2) Poġgi s-sieq fuq il-bużżieqa tal-fluwidu berried bit-3 prongs b' konnessjonijiet ta' malajr ippuntati lejn is-swaba' tas-saqajn.
- 3) Geżwer sew il-bqija tal-ilbies madwar is-sieq, filwaqt li tpoġgi l-konnettur tal-plastik f'linja mal-qasba.
- 4) Iġbed iċ-ċineg sew fuq in-naħa ta' fuq tal-ilbies tal-irkoppa u waħhal il-Velcro f'postu.
- 5) Qabbad l-ilbies mal-pajp umbilikali billi ddaħhal it-tliet prongs tal-ilbies fil-pajp. Aghfas sakemm tisma' "klikk".
- 6) Setting Rakkomandat tal-Pressjoni Massima: Għolja

Ilbies għall-Għaksa (TX0104)

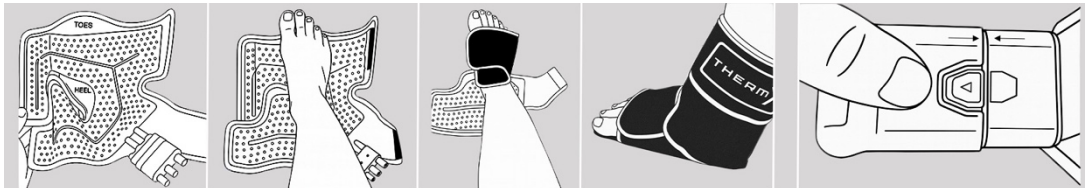


- 1) Nehhi t-tgeżwir tal-ilbies b'tali mod li joqgħod bħal boot bil-bużżieqa tal-fluwidu berried thares 'il fuq.
- 2) Poġgi s-sieq u l-pala tas-sieq fuq il-bużżieqa tal-fluwidu berried billi tqiegħed is-swaba' tas-saqajn fuq il-kelma "toes" (swaba' tas-saqajn) u l-għarqub fuq il-kelma "heel" (għarqub).
- 3) Kebbeb sew it-tikketta żgħira tal-ilbies fuq in-naħa ta' fuq tas-sieq u waħhal il-Velcro sew.
- 4) Kebbeb sew it-tikketta kbira tal-ilbies madwar il-pexxun/il-qasba tas-sieq u waħhal il-Velcro sew.
- 5) Qabbad l-ilbies mal-pajp umbilikali billi ddaħhal it-tliet prongs tal-ilbies fil-pajp. Aghfas sakemm tisma' "klikk".
- 6) Setting Rakkomandat tal-Pressjoni Massima: Għolja

Ilbies għan-Nofs tas-Sieq (TX0111)

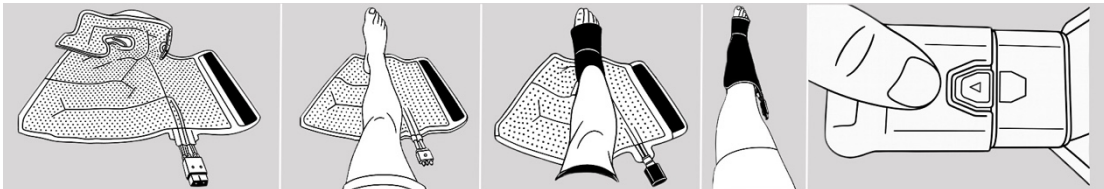


- 1) Nehhi t-tgeżwir tal-ilbies b'tali mod li joqgħod bħal boot bil-bużżieqa tal-fluwidu berried thares 'il fuq.
- 2) Poġgi l-pala tas-sieq fuq il-bużżieqa tal-fluwidu berried billi tqiegħed is-swaba' tas-saqajn fuq il-kelma "toes" (swaba' tas-saqajn) u l-għarqub fuq il-kelma "heel" (għarqub).
- 3) Kebbeb sew it-tikketta tal-ilbies bit-tikketta 1 madwar is-sieq u waħhal il-Velcro sew.
- 4) Kebbeb sew it-tikketta tal-ilbies bit-tikketta 2 madwar il-pexxun u waħhal il-Velcro sew.
- 5) Qabbad l-ilbies mal-pajp umbilikali billi ddaħhal it-tliet prongs tal-ilbies fil-pajp. Aghfas sakemm tisma' "klikk".
- 6) Setting Rakkomandat tal-Pressjoni Massima: Għolja

Ilbies għall-Ispalla (TX0101) / Ilbies għall-Ispalla XL (TX0110)

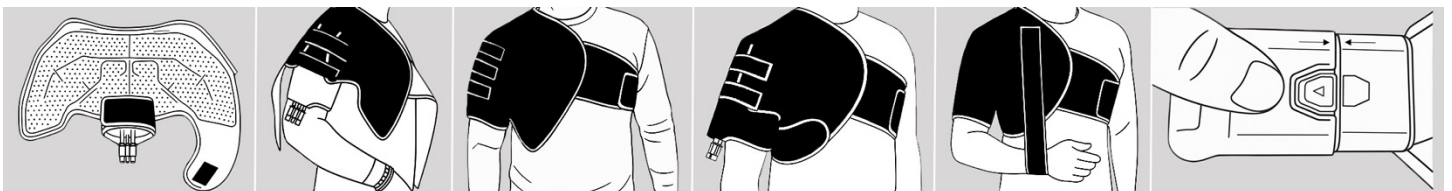

- 1) Orbot iċ-ċinga tal-Velcro tal-bicep f'forma ta' ċirku, u oħloq toqba biex il-bicep tiegħek jgħaddi minnha.
- 2) Daħhal id-driegħ fid-drapp forma ta' ħolqa. Aġġusta ċ-ċinga tal-Velcro biex tiżgura li toqgħod sew madwar il-biceps.
- 3) Orbot iż-żewġ ċineg taħt id-driegħ l-oppost tiegħek u madwar sidrek. Kun żgur li ċ-ċineg ikunu qed joqogħdu sew.
- 4) Qabbad iċ-ċinga tal-konnettur taħt id-driegħ. Kun żgur li toqgħod sew u li ċ-ċinga ma tkunx qed toqros madwar taħt l-idejn.
- 5) Erga' aġġusta ż-żewġ ċineg ta' konnessjoni fuq id-deltoid biex tikseb il-qagħda mixtieqa. Jekk tixtieq, daħhal il-polz fil-braga tal-polz mhux obligatorja u waħhal it-tarf maħlul mal-Velcro fuq sidrek.


- 6) Qabbad l-ilbies mal-pajp umbilicali billi ddaħħal it-tliet prongs tal-ilbies fil-pajp. Aghfas sakemm tisma' "klikk".
- 7) Setting Rakkomandat tal-Pressjoni Massima: Baxxa

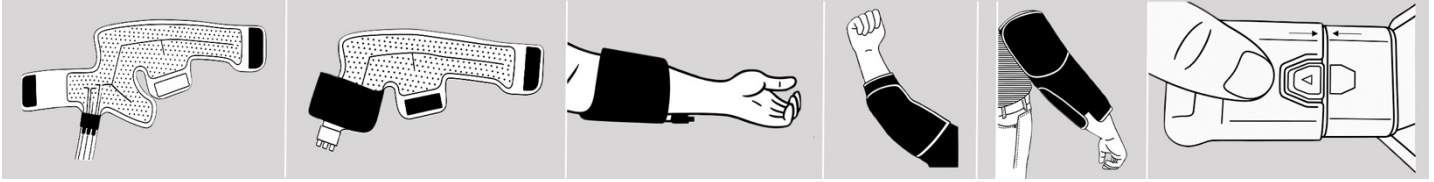

Ilbies għall-Minkeb (TX0103)

- 1) Nehħi t-tgeżwir u poġgi l-ilbies għall-minkeb ċatt bil-bużżieqa tal-fluwidu berried thares 'il fuq.
- 2) Kebbeb iċ-ċinga bit-tikketta 1 madwar il-ġisem, billi torbot il-flaps flimkien u b'hekk toħloq post għad-driegħ.
- 3) Daħħal id-driegħ tiegħek fl-ilbies b'tali mod li l-konnettur bi tliet prongs ikun fuq in-naħa ta' fuq tad-driegħ tal-lemin jew fuq in-naħa t'isfel tad-driegħ tax-xellug, skont liema driegħ ikun qed jiġi ttrattat (ara l-istampi ta' hawn fuq). Kun żgur li iċ-ċinga tad-driegħ tkun qed toqgħod sew.
- 4) Bil-minkeb mgħawweġ ftit, kebbeb l-itwal ċinga bit-tikketta 2 madwar il-biceps u kun żgur li iċ-ċinga tkun imqabbda sew.
- 5) Waħħal il-flap li jifdal mal-Velcro fuq id-driegħ.
- 6) Qabbad l-ilbies mal-pajp umbilicali billi ddaħħal it-tliet prongs tal-ilbies fil-pajp. Aghfas sakemm tisma' "klikk".
- 7) Setting Rakkomandat tal-Pressjoni Massima: Medja

Ilbies għall-Id (TX0112)

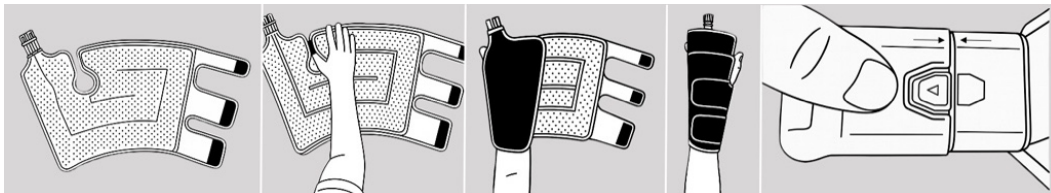

- 1) Nehħi t-tgeżwir tal-ilbies b'tali mod li joqgħod ċatt bil-bużżieqa tal-fluwidu berried thares 'il fuq.
- 2) Itwi l-ilbies min-nofs bil-bużżieqa tal-fluwidu berried thares 'il ġewwa. Waħħal iċ-ċineg tal-Velcro sew madwar it-truf biex l-ilbies jibqa' f'postu.
- 3) Daħħal idejk ġewwa l-ilbies għat-trattament.
- 4) Qabbad l-ilbies mal-pajp umbilicali billi ddaħħal it-tliet prongs tal-ilbies fil-pajp. Aghfas sakemm tisma' "klikk".
- 5) Setting Rakkomandat tal-Pressjoni Massima: Medja

KIF TNEĦHI U TIBDEL L-ILBIES

Aghfas il-buttuna ħamra biex tiskonnettja l-ilbies mill-pajp. HOLL iċ-ċineg tal-Velcro u nehħi l-ilbies mill-ġisem. Qabbad l-ilbies il-ġdid.

DAQSIJET TAL-ILBIES

Ilbies	Żona	Firxa tad-Daqs
Lura	Ċirkonferenza tal-Qadd	.56-1.37 m
Ġenbejn	Wisa' tal-Ġenbejn	.66-1.27 m
Irkoppa	Tul Massimu	.41 m
	Ċirkonferenza massima tan-naħa ta' fuq	.89 m
	Ċirkonferenza massima tan-naħa t'isfel	.69 m
Għaksa	Daqs massimu taż-żarbun	EU 52
Nofs is-Sieq	Ċirkonferenza tal-pepxun	.51 m

Ilbies	Żona	Firxa tad-Daqs
Spalla	Ċirkonferenza tas-sider	.90-1.40 m
Spalla XL	Ċirkonferenza tas-sider	1.09-1.65 m
Minkeb	Ċirkonferenza tal-bicep	.48 m
	Ċirkonferenza tad-driegħ	.41 m
Id	Minn ponot is-swaba' sal-polz	.36 m
	Wisa' tal-id	.28 m

BIJOKOMPATIBILITÀ

Il-materjal li jiġi f'kuntatt mal-ġilda ġie ttestjat biex jissodisfa r-rekwiżiti tal-bijokompatibilità skont l-istandard ISO10993.

RIMI

Wara l-użu, armi l-prodott skont ir-regolamenti lokali.


GARANZIJA

Dan l-ilbies għandu garanzija limitata ta' sitt xhur. Tista' ssib it-termini, il-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet ta' din il-Garanzija tal-ilbies fil-manwal tal-istruzzjonijiet tal-Unità Therm-X. **MA JEŽISTUX GARANZIJI OĦRA, LA ESPRESSI U LANQAS IMPLIĊITI.** Tista' tikseb kopja ta' din il-Garanzija wkoll onlajn minn thermxtherapy.com jew billi tibgħat email fuq customerservice@thermxtherapy.com.

SERVIZZ U APPOĠĠ LILL-KLIJENTI

Meta tirrapporta problema, ipprovi n-numru Uniku ta' Identifikazzjoni tal-Apparat (eż. S/N) tal-ilbies (kif identifikat fuq it-tikketta tal-konnettur 3-in-1), flimkien mal-informazzjoni ta' twissija korrispondenti, jekk ikun hemm, lill-manifattur jew lir-rappreżentant awtorizzat tiegħu u lill-Awtorità Nazzjonali tiegħek.

Biex tikseb servizz, ikkuntattja lid-distributur tiegħek li xtrajt dan il-prodott minn għandu u pprovi n-numru Uniku ta' Identifikazzjoni tal-Apparat (eż. S/N) tal-ilbies (kif identifikat fuq it-tikketta tal-konnettur 3-in-1).

	<p>Zenith Technical Innovations, LLC 1396 St. Paul Ave. Gurnee, IL 60031 USA</p> <p>customerservice@thermxttherapy.com +1.847.672.7481</p>	 <p>MedEnvoy Global B.V. Prinses Margrietplantsoen 33 Suite 123 2595 AM The Hague The Netherlands</p> <p>vigilance@medenvoyglobal.com +31.70.326.21.48</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="1308 1709 1409 1766">EU</td><td data-bbox="1409 1709 1533 1766">REP</td></tr></table>	EU	REP
EU	REP				